

Ovládněte všechny své výzvy



*initial*TM
LiSi

GC Initial LiSi

CZ Technický manuál

LEDEN 2025

CC



Strana

Úvod a zamýšlené použití	48
Přírodní estetika ...	49
Barevný průvodce	50
Přehled	51
LiSi One	52-55
Standardizovaný postup rekonstrukce	
LiSi Classic	56-61
Bioestetická rekonstrukce	
LiSi Expert	62-69
Bioestetická rekonstrukce	
LiSi Posterior	70-79
Od monolitické rekonstrukce po bioestetické vrstvení s IQ Lustre Pastes NF	
Kuchařský program	80
GC Initial INside - barevný vzorek	81-82
Fyzikální vlastnosti a platnost	83
Příklady aplikací LiSi v GC	84-85
GC Initial LiSi Press	86
Související produkty	87

Úvod a zamýšlené použití

ES Děkujeme, že jste si vybrali naši keramickou úpravu Initial LiSi Coating.

GC Initial LiSi je keramika pro povlakování lithium-disilikátních struktur. GC Initial LiSi je optimalizován pro použití s GC Initial LiSi Press* a GC Initial Lustre Pastes NF*.

Tyto pokyny k použití vám poskytnou představu o tom, jak snadné je dosáhnout přesvědčivých estetických výsledků s minimálním pracovním zatížením, což zdůrazňuje vynikající vlastnosti této keramiky.

PT Děkujeme, že jste si vybrali naši keramickou techniku GC Initial LiSi na dýhu.

GC Initial LiSi je keramika pro lité disilikátové rámové dýhy. GC Initial LiSi je vhodný pro použití s GC Initial LiSi Press* a GC Initial Lustre Pastes NF*.


Tyto pokyny k použití vám poskytnou představu o tom, jak snadné je dosáhnout esteticky přesvědčivého výsledku s minimální zátěží, což zdůrazní vynikající vlastnosti této dýhové keramiky.



*Viz konkrétní pokyny k použití.

*Prosím, zkontrolujte návod k použití.

ES Přírodní estetika ...

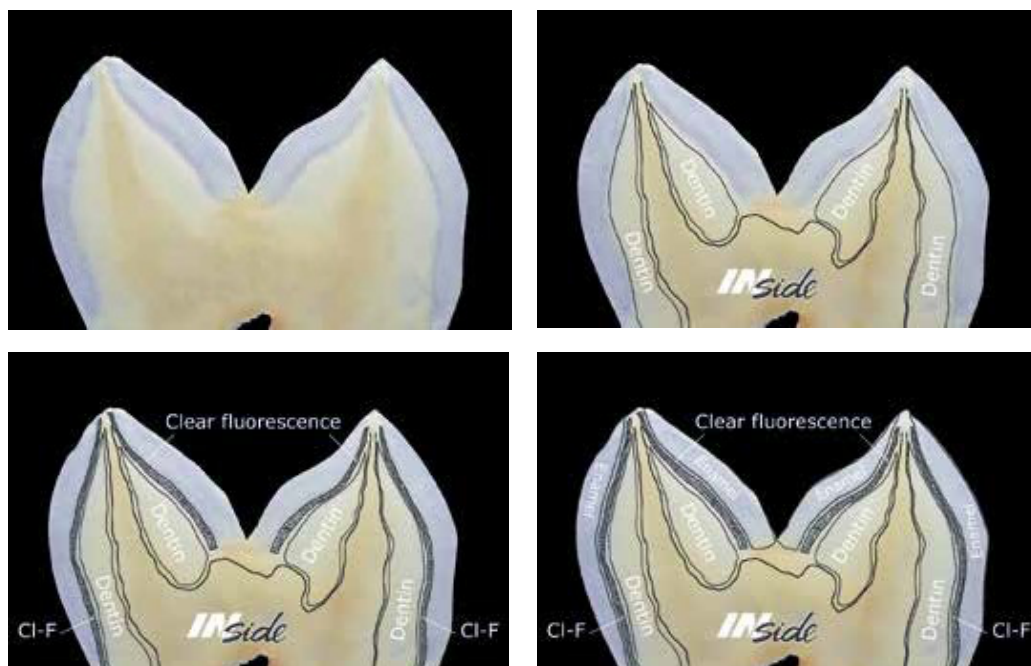

● Díky jednoduché standardizované rekonstrukční technice můžete estetické vlastnosti reprodukovat přirozeným vzhledem.

ES Barevný průvodce

V-SHADE		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Zubovina	16	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
Čistá fluorescence	1	CL-F															
Smalt	4	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

V-Shade odkazuje na barevný průvodce VitaR. VitaR je registrovaná ochranná známka společnosti VITA Zahnfabrik H. Rauter, GMBH & Co. KG, Bad Sackingen, Německo.

GC Počáteční barevná tabulka systému LiSi GC

Popis	Ne. lahví	Barevný kód
Zubovina	16	DA1-DD4
Fluo Dentin	3	
Smalt	4	E57-E60
Čistá fluorescence	1	CL-F
Průsvitný	2	TN: Průsvitný neutrální PRO: Průsvitný opál
Průsvitný stříh	5	TM-01: Modrá TM-02: Bílá TM-03: Rosa TM-04: Žlutá TM-05: Šedá
Intenzivní smaltování	4	EL-11: Šedá EL-12: Žlutá měkká NO-13: Orange NO-14: Žlutá
Smaltová okusal	3	EO-15: Bílá EO-16: Žlutý neutrální EO-17: Fialová/Šedá
Smaltovaný opál	5	EOP-1: Bělená bílá EOP-2: Bílá EOP-3: Modrá EOP-4: Šedá EOP Booster

Popis	Ne. lahví	Barevný kód
Cervikální průsvitný	4	CT-21: Lehký CT-22: Žlutý měkký CT-23: Bledě oranžová CT-24: Žlutá CT-25: Brown
IN strana	11	IN-41: Plameňák IN-42: Terracota IN-43: Sun IN-44: Písek IN-45: Havana IN-46: Brazílie IN-47: Sienna IN-48: Kurkuma IN-49: Marakuje IN-50: Curry IN-51: Olive
Dásňový	1	GM-23: Základní světlo
Glazura	1	GL
Korekční prášek	1	VR
Bleach	4	BLD-1: Světlo BLD-2: Bílá BLD-3: Xwhite BL-E: Smalt

Obecné informace



Při povrchové úpravě lithium-disilikátových struktur je nutné dodržovat pokyny příslušného výrobce. Konstrukce musí tvořit alespoň 50 % celkové tloušťky.

Doporučuje se vaření na mytí, viz program vaření na straně 78. Pro každé vypalování mýváním lze použít jakýkoli keramický prášek z celé řady GC Initial LiSi (kromě COR a GL).

Další možností je nanést Lustre Pastes NF v tenké vrstvě, která pokryje celý povrch.



Fotografie a paso a paso: Michale Brusch - M.B. Dentaltechnic GmbH,
Düsseldorf /
Alemania

LiSi One • Standardizovaný rekonstrukční postup LiSi One •



Lithium-disilikátové víčka se vstříkují nebo mletí a dokončují jako kompletní dentinové kusy podle specifikací výrobce.

Palatinální plocha je vstříkována nebo tvarována z lithia disilikátu zcela anatomicky do incizální oblasti (přibližně 0,5-1,0 mm).



Pokud je to nutné, lze individualizace a zesílení provádět přímo na strukturu pomocí INVIVO make-upu nebo Lustre Pastes NF.

Make-up je nastaven na nízkou teplotu vaření. (přibližně 730 °C, 1 minuta) a měly by mít určitou jasnost.



● LiSi One • Standardizovaný rekonstrukční postup



- Konečný tvar se získá aplikací standardního E-57 na smalt E-60.



LiSi One • Standardizovaný rekonstrukční postup



Korekce jsou po vypálení glazury potřeba jen zřídka, a ty se provádějí s dříve použitou barvou glazury.



Pro dokončování a přípravu vypalování glazury se používají obvyklé přístroje.



- Konečný výsledek po vypalování glazurou.
Minimální úsilí a maximální výsledky.



- LiSi One • Standardizovaný rekonstrukční postup
- LiSi Classic • Bioestetická rekonstrukční procedura



Lithium-disilikátové víčka se vstříkují/frézují a dokončují jako kusy dentinu redukované na přibližně 30 % podle specifikací výrobce.



Lomový okraj řezné třetiny je pokryt vysoce fluorescenčními FD-91 (jasně bílá), FD-92 (žloutlavá) nebo FD-93 (hnědavá), v závislosti na požadované barvě zubu.



Cervikální oblast je pokryta vysoce chromatickým materiálem INSide.

● LiSi Classic • Bioestetická rekonstrukční procedura



● Vrstva dentinu by neměla být příliš rovná ani hladká...



● ... a musí zcela zakrýt celou strukturu.



● Kousek vařeného dentinu s nepravidelnostmi v oblasti řezu (lepší lom světla/živost).

● LiSi Classic • Bioestetická rekonstrukční procedura



- Kvůli nízkému smrštění při výstřelu je někdy nutné provádět drobné korekce zubinem.



- Tenká vrstva (asi 0,2 mm) čiré fluorescence (CL-F)
...




- ... Je aplikován rovnoměrně přes celý dentin a rozprostírá se v řezném směru (efekt hloubky / směr světla).

● LiSi Classic • Bioestetická rekonstrukční procedura



Konečná forma korony je vyrobena směsí hecha smaltů od E-57 po E-60 a EOP-2 po EOP-4 ...

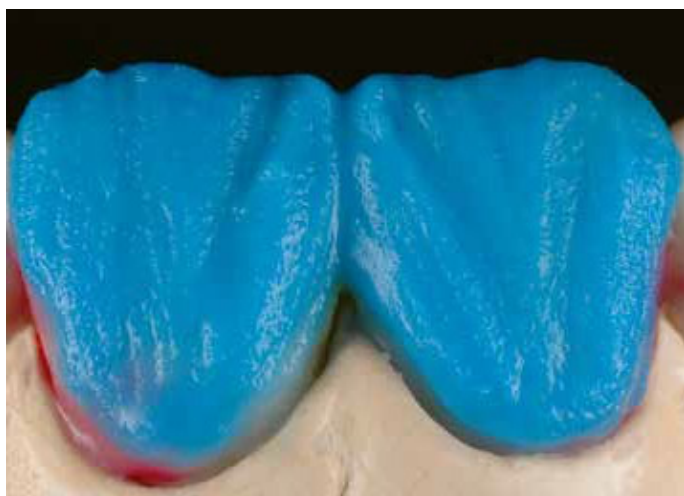

... s opaleskujícími sklovinami (EOP) vždy smíchanými se standardní sklovinou (E-57-E60) přibližně 10 %. Takové skloviny zvyšují opalescenci a tím i dynamiku světla skloviny.



Restaurace vypalované podle parametrů prvního výpalu musí mít měkký lesk (viz pokyny k vaření).

● LiSi Classic • Bioestetická rekonstrukční procedura



- Ve většině případů lze jakoukoli potřebnou korekci provést směsí glazury a opalescentu použité při prvním vypalování.



- Pro dokončování a přípravu vypalování glazury se používají obvyklé přístroje.



● LiSi Classic • Bioestetická rekonstrukční procedura



JE Individualizovaná charakterizace může být aplikována keramickými make-upy* nebo Lustre pastes NF (viz manuál Initial IQ Lustre Pastes NF).



JE Snadnost provádění velmi přirozených a živých restaurací s vysokou mírou světelné dynamiky.

LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



Lithium-disilikátové korunky jsou anatomicky výrazně redukovány pro metodu bioestetické stratifikace. Musí být dodržena minimální tloušťka stanovená výrobcem.



Palatinální plochy mohou zůstat zcela anatomické až do incizální třetiny, což zvyšuje stabilitu obnovy.




Pálení na mytí (viz strana 49).

● LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



JE Vrstvy Fluo Dentinu (FD-91 - FD-93) požadované barvy jsou vrstveny na žáruvzdorný řezný okraj.

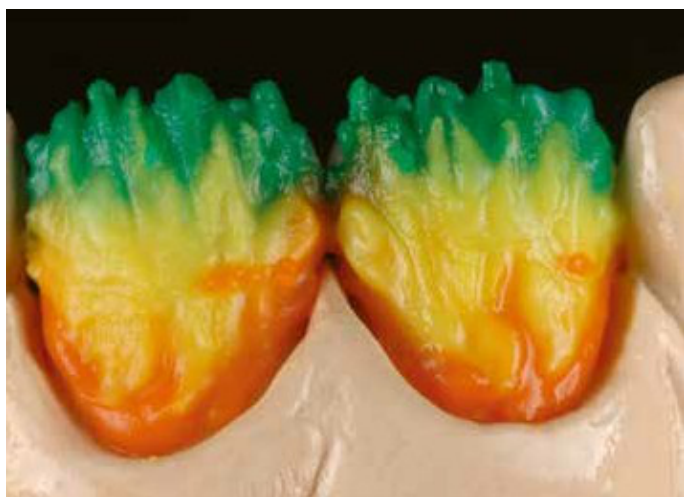

Okrajová oblast je odhalena, obnoví se s materiálem INside desseado (viz tabulka barevných kombinací).



Pro lepší kontrolu nebo upevnění modelovaných vnitřních struktur je nutné/možné provést meziletní zážeh ...

LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



- Na této struktuře, velmi chromatické a fluorescenční, je dentin tvarován do finálního tvaru s nižší tloušťkou přibližně 50 % než obvykle.



Tato metoda umožňuje dosáhnout struktury vrstvy smaltu/průhlednosti/opálu, která je velmi podobná přirozené struktuře.



Aby bylo možné struktury mamelonů reprodukovat jasně a chromaticky přesně, dentin je stratifikován do tenkých vrstev s FD-91 v této oblasti (fluorescenční bílá).

● LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



Intenzita mamelonových struktur je upravena pomocí materiálu INside nebo INvivo make-upu (viz tabulka barevných kombinací).



Dentin je zcela pokryt tenkou vrstvou (přibližně 0,2 mm) fluorescenčního transpa materiálu (CL-F).



Všechny přírodní zuby mají tuto vrstvu, která výrazně zvyšuje hloubkový efekt vrstvené korunky.

LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



Vrstvení skloviny začíná aplikací namodralé nebo šedavé opalescentní skloviny (EOP-3/EOP-4) na incizální nebo proximální oblast.



Pro střídavé vrstvení smaltu se smaltové a transpa materiály s různou úrovní průhlednosti (např. E-57, EOP-2, TO, CL-F) nanášejí souvisle.



Střídavá stratifikace je omezena na incizální tercii. Například lesklá opalizující sklovina EOP-2 je vhodná pro vytváření halo efektů v oblasti dentinu.

● LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



Konečný tvar je vždy vytvořen směsí skloviny (E-58 až E-60) a opaleskující skloviny (EOP-2 až EOP-4), aby napodobil světelnou dynamiku přirozených zubů.



Opelescentní sklovina (EOP) se vždy mísí s požadovanou standardní sklovinou (E-57 až E-60) podle stáří zubů, minimálně 10 % (starší) a maximálně 30 % (mladé). EO-15 a INside IN-44 přispívají jednoduchým a efektivním způsobem k modelování řezné hrany.



Tvar řezného okraje by měl zůstat otevřený ústně a vnitřní obal (CL-F/dentin) by neměl být pokryt sklovinou. Tímto způsobem je do interiéru restaurace směřováno více světla.

● LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukční procedura



- Kvůli nízkému smrštění při vaření bude potřeba jen několik oprav, které ...



- ... Budou aplikovány na řeznou oblast stejným glazurním/opalizujícím materiálem. Na okrajích se používají směsi dentinu/skloviny nebo CT materiálů.



- Jakmile budou dokončeny, restaurace jsou přesvědčivé...

● LiSi Expert • Bioestetická rekonstrukce LiSi



... Po vypálení glazury díky vysoké vitalitě má fluorescenční a opalescentní vzhled podobný přirozeným zubům.

● Závěr.

● LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



- Korunky vyrobené z lithium disilikátu by měly, Nejprve musí být modelovány do zcela anatomického tvaru, aby mohly být následně v oblastech, které jsou zmenšovány, kontrolované a anatomicky redukovány. Na potažení.



- Korunky jsou vstříkovány a dokončeny podle specifikací výrobce: část 16 monolitická, část 15 vyžaduje částečný nátěr, část 14 vyžaduje kompletní nátěr.



LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



● **Důležitá poznámka:** Povrchy, které se mají glazovat Lustre pastou, je třeba nejprve pískovat Al₂O₃ na 1 baru a poté je vyčistit parním čističem.

Nejprve důkladně potřete povrchy "nepovlakujících" oblastí Lustre pastou L-N.

Pro dosažení požadované barvy Vitapan Classic* aplikujte lesky od A do D víceméně intenzivně v neutrálním lesku.

● LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



- Všechny plně anatomické povrchy pokryjte L-N Luster a A-D Lustery. Pro sekvenci wash vaření dílů, které mají být potaženy, lze individualizaci provést aplikací Body Lustres A-D nebo Effect Lustres v tenké vrstvě, která pokrývá celý povrch.

LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



Existují dva šedé a dva modré efektní lustresy pro dosažení vyšší šedé hodnoty nebo modrého opalescentního efektu. Tyto barvy zvyšují "průhlednost" monolitických základních částí a/nebo účinně zesilují efekt jednoduché částečné vrstvy se standardními smalty (L-3/4 šedá - L-5/6 modrá). Jsou nanášeny v tenké vrstvě, která pokrývá celý povrch.

LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



Obě efektní Lustres L-1 (vanilka) a L-V (hodnota) lze použít k vytvoření velmi přirozeného lesku na všechny hrbolky, okrajové hřebeny a sekundární trhliny. Dělalí z nich překvapivé, velmi plastické morfologie. Stejně tak lze použít všechny počáteční INvivo složení k získání komplementárních vlastností.

Poznámka: Při použití Lustre Pastes NF na povrchy, které se nemají potahovat, si prosím zkontrolujte podrobné technické pokyny pro Lustre Pastes NF od Initial IQ.



Korunky s glazurou a širokou škálou aplikací Lustre pasty.

LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



- Individuálně natřený povrch Lustre pastami je vrstven standardním smaltem E-57 až E-60. Sklovitý povlak reprodukuje požadovanou anatomii a měl by pokrývat celou lithium-disilikátovou korunu, přičemž na okraji se zužuje.



- Obvykle vypalovaná vrstva glazury nevyžaduje korekční výpal díky minimálnímu smrštění keramického povlaku LiSi a může být přímo dokončena pro vypalování glazury.



● LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



- Při klasickém bioestetickém vrstvení zadních částí jsou okluzní oblast a celá okrajová plocha pokryty materiálem INside (viz tabulka barevných kombinací).



- Žáruvzdorné hrany konstrukce jsou vrstveny vysoce fluorescenčními materiály FD-91, 92 nebo 93, v závislosti na požadované barvě. Pokud je to nutné, lze barevnou individualizaci materiálu FD snadno zvýšit pomocí materiálu INside.



- LiSi dentiny byly navrženy tak, aby byly velmi chromatické...

LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



... Dentin je tedy třeba relativně jemně stratifikovat, aby vytvořil bioestetický a přirozený vzhled, a ten lze stratifikovat ...



... s průhledným a fluorescenčním materiálem CL-F na okrajovém okraji.



Stejně jako u bioestetického vrstvení předních zubů se konečný tvar aplikuje směsí opalescentního a sklovinného nátěru. Vždy míchat kolem 10 % EOP-2 na EOP-4 se standardní E-57 sklovinou na E-60, podle požadovaného efektu.

LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



Všechny okrajové hřebeny, hlavní fosy a hrbolky a sekundární trhliny jsou vystlány tenkou vrstvou EO-15, EO-16 nebo INside 44.



Korunka by měla mít po vypálení měkký lesk. Velmi lesklé povrchy, stejně jako hrubé, tupé nebo neprůhledné povrchy, by se měly vyvarovat (viz program střelby na straně 78).



Kvůli nízkému smrštění při vypalování u keramiky LiSi by mělo být korekční vypalování použito pouze v některých případech. Tyto lze provádět na okluzní úrovni pomocí EO-15 (například) na ústní úrovni se sklovinou nebo opalescentním materiálem a na okrajové úrovni s CT materiálem (například).

LiSi Posterior • Od monolitické rekonstrukce k bioestetické stratifikaci s IQ Lustre Pastes NF



Dokončování a příprava vypalování glazury probíhá obvyklým způsobem (texturování povrchu, abrazivní tryskání [50 mμ, tlak 1 bar] a čištění).

Po vypálení glazury (v tomto případě s Lustre Pastes NF) bude mít korunka velmi přirozený vzhled a dobrou světelnou dynamiku.

Důležitý tip: kromě Lustre Pastes NF (používaných v uvedených případech) nabízí keramický systém LiSi také možnost použití specifických pudrů a make-upů LiSi Glaze. Po vypalování glazurou by měly být části objeveného lithium disilikátu v případě potřeby mechanicky leštěny.

programy



	PŘEDEHŘÍVACÍ TEPLOTA PŘEDOHŘÍVACÍ TEPLOTA	DOBA SCHNUTÍ TEMPO DE SECAGE	NÁRŮST TEPLoty	VACÍO VÁCUO	KONEČNÁ TEPLOTA	TIEMPO DE MANENIMIENTO TEMPO DE PERMANENCIA	ASPECTO ASPETO
Cocción Wash Wash Výpal	430°C	4 min	45°C/min	+	760°C	1 min	Trochu lesklé Trochu jasné
Vaření prvního dentinu při prvním vypálení dentinu	430°C	6 minut	45°C/min	+	760°C	1 min	
Vaření druhého dentinu při druhém vystřelování Dentinu	430°C	6 minut	45°C/min	+	750°C	1 min	
Glazurová glazura	450°C	4 min	45°C/min	-	760°C	1 min	Brillante Brilhante
Glazado con polvos Glaze (GL) Glazamento com Glaze Powder (GL)	450°C	4 min	45°C/min	-	760°C	1 min	Brillante Brilhante
Glazura lustrovou pastou (LP) Glazura lustrovou pastou (LP)	450°C	4 min	45°C/min	-	735° - 760°C	1 min	Brillante Brilhante
Korekční hmota Vaření prášku pro korekci	450°C	4 min	45°C/min	+	690°C	1 min	Brillante Brilhante

Zde uvedené parametry vaření jsou pouze indikativní a proto je třeba je upravit podle trouby a jejího správného provozu. Nejdůležitější je dosáhnout správného výsledku vaření. Tyto parametry vaření by měly být používány pouze jako vodítko.

GC Initial INSide - Tabulka kombinací

GC Initial INSide - Pole aplikace a referenční mapa

Primární barvy dentinu / Jádra dentinu s vysokým obsahem chroma

BAREVNÁ SKUPINA BAREVNÁ SKUPINA	COLORES JÁDRA	ODKAZ "INSIDE" ODKAZ "INSIDE"
Barvy A jádra	A1, A2	Písek IN-44
	A3	Písek IN-44
		IN-42 Terakota
	A3.5, A4	IN-45 Havana IN-46 Brazílie
Colores B Cores B	B1, B2	IN-43 Sun
	B3	IN-43 Sun
		IN-47 Sienna
	B4	IN-48 Kurkuma Kari-50
Barvy C Jádra C	C1, C2	IN-51 Olive
	C3, C4	IN-51 Olive
		IN-45 Havana
Barevné D jádra D	D2, D3, D4	Písek IN-44
		IN-51 Olive

Colores Mamelones

BAREVNÁ SKUPINA BAREVNÁ SKUPINA	COLORES JÁDRA	ODKAZ "INSIDE" ODKAZ "INSIDE"
Světlé barvy zubů Průhledná jádra zubů	A1, A2, A3 - B1, B2 C1, C2 - D2	Písek IN-44
		IN-41 Flamingo
		IN-43 Sun
		IN-51 Olive
Teplé barvy zubů Jádra zubů	A3.5, A4 - B3, B4 C3, C4 - D3, D4	IN-42 Terakota
		IN-45 Havana
		IN-47 Sienna
		Kari-50
		IN-51 Olive

GC Initial INSide - Pole aplikace a referenční mapa

Barvy proximální / krčkové /

Dentin s vysokou fluorescencí -
Oblast použití a referenční tabulka

BAREVNÁ SKUPINA BAREVNÁ SKUPINA	COLORES JÁDRA	ODKAZ "INSIDE" ODKAZ "INSIDE"
Barvy A	A1, A2, A3	IN-42 Terakota
		Písek IN-44
	A3.5, A4	IN-42 Terakota
		IN-45 Havana
		IN-46 Brazílie
		Marakuje IN-49
Colores B	B1, B2	IN-43 Sun
		IN-47 Sienna
	B3, B4	IN-47 Sienna
		IN-48 Kurkuma
Barvy C	C1, C2	IN-51 Olive
	B3, B4	IN-51 Olive
		IN-45 Havana
Barevné D	registrada de VITA Zahnfabrik H. P. Richter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Alemania. D2, D3, D4	Písek IN-44 IN-51 Olive

FD-91

- Jako základ pro velmi jasné barvy
- Jako základ pro "vybělené barvy"
- VITAPAN A1 / B1 / C1 / D2

FD-92

- Jako základ pro standardní B barvy

FD-93

- Jako základ pro standardní barvy A
- Pro standardní barvy C a D - FD-93 smíchaný s IN-51

Fyzikální vlastnosti a platnost

VLASTNOSTI / VLASTNOSTI	MĚŘIT / MĚŘIT	VALUE / WERT	NORMA / NORMA
1A Dentin 1A Dentin	°C	760	
CET CET (25-500°C)	Vaření / vaření	2	4
	10-6xK-1	9,3	9,3
Temp transformación de vidrio Temperature of glass transformation	°C	520	-
Rozpustnost Rozpustnost	µg/cm ²	16	Maximálně 100
Hustota	G/CM ²	2,4	-
Ohybová pevnost Ohybová pevnost	Mpa	84	Min. 50
Průměrná velikost částice µm Průměrná velikost částice	D 50 %	25	-
Typ keramiky Typ keramiky	N=Přirozené / S=Sintético N=Příroda / S=Syntetické	N/S	-

POPIS PRODUKTU / PRODUCTO	PLATNOST
GC Initial LiSi polvos	10 let / 10 let
GC počáteční modelovací kapaliny	4 roky / 4 roky
GC Initial Spectrum Stains & Glaze Powder / GC Initial INvivo / INSitu Stains & Glaze Powder	10 let / 10 let
GC Initial Spectrum Stains Glaze-Glaze pasta Liquid / GC Initial INvivo / INSitu Glaze Liquid	4 roky / 4 roky

● Příklady aplikací LiSi v GC



ES Fotografie 1-2: ZTM M. Brüsche a Dr. Krueger-Janson (Německo)
Fotografie 3: CDT. Pan Ibrahim (Švýcarsko)

ES Příklady aplikací LiSi v GC



Fotografie 1-3: MDT S. Maffei (Itálie), fotografie 4-5: MDT Ph. Llobell (Francie)

GC Initial LiSi Press

Čtyři úrovně průsvitnosti

PT



HT (náhrada skloviny) HT (náhrada skloviny)

Nejllepší kombinace průhlednosti pro přírodní lak na nehty diente, no se vê oscuro (nízká hodnota) v ústech.

MT (tisk a make-up) MT (lisování a barvení)

Barevná řada Vita* s teplými barvami z rodiny keramických materiálů GC Initial.

LT - Make-up nebo stratifikace LT - Make-up nebo vrstvení

Ingoty s nízkou průsvitností, podle barevné linie VITA. Ideální pro make-up nebo 'cut-down' GC Initial LiSi techniku.

LT (jednotělesové A, B, C, D nebo koncept vrstev)

Kompaktní barevná linie podle konceptu Počáteční IQ - Jedno tělo..

MO (stratifikace)

MO (vrstvená aplikace)


Díky silné fluorescenci lze přirozenou barvu reprodukovat pomocí keramické vrstvy GC Initial™ LiSi.



Výběr barev

- Jednoduchá barevná linie
- Snížení zásob a nákladů
- Dostatečně přizpůsobivá pro vysoce estetické restaurování

Úroveň průsvitnosti	Bělit			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
HT	HT-EXW	BRZY	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	Střední průhlednost (MO)			HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	BRZY	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	BRZY	BRZY	MT-B1	MT-B2	BRZY	BRZY	MT-C1	MT-C2	BRZY	BRZY	MT-D2	BRZY	BRZY	
LT	LT-B00	LT-B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	BRZY	BRZY	LT-D2	BRZY	BRZY	
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D				
MO	MO-0			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2		MO-1		MO-2						

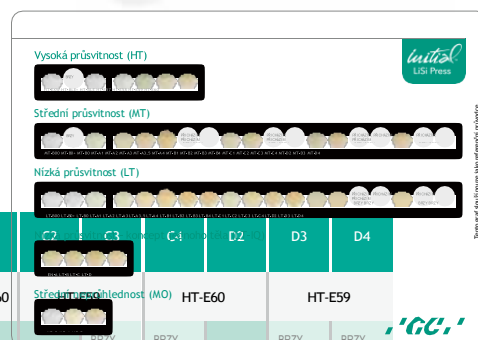

● Související produkty



GC Initial IQ Lustre Pastes NF sada - V-



GC Initial IQ Lustre Pastes NF sada - Gum Shades



GC počáteční spektrální

Požadavek na regulaci zdravotnických prostředků

Nežádoucí účinky - Hlášení: Pokud se dozvíte o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci nebo podobných událostech při použití tohoto produktu, včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto pokynu, nahlaste je prosím přímo prostřednictvím příslušného systému bdělosti, a to výběrem příslušného orgánu vaší země dostupného přes následující odkaz:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en a také našemu internímu systému bdělosti: vigilance@gc.dental. Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.



 EU: GC EUROPE N.V.
Výzkumný park Haasrode-Leuven
1240 Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe>

ODPOVĚDNÝ VÝROBCE V KANADĚ GC
AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gcamerica.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/de-DE>

GC ITALIA S.r.l.
Via Luigi Cadorna 6, I-20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39 02 98282068
info.italy@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/it-IT>

GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court, Coopers Court, Newport Pagnell,
UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900
info.uk@gc.zubní <https://www.gc.dental/europe/en-GB>

GC FRANCANCE S.a.s.
8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie Cedex
tel. +33.1.49.80.37.91, fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, <https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

GC IBÉRICA - Zubní produkty, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1º, Of 4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
tel. +34.916.364.340, fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, <https://www.gc.dental/europe/es-ES>

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/de-AT>

ODPOVĚDNÁ OSOBA VE
VELKÉ BRITÁNII GC UNITED
KINGDOM LTD.
Coopers Court Newport Pagnell,
Buckinghamshire, mk16 8js, Spojené království

GC EUROPE NV - Obchodní oddělení
Beneluxu, výzkumný park Haasrode-Leuven
1240 Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/fr-BE>

GC EUROPE N.V. - Východoevropská
kancelář Siget 19b, HR-10020 Záhřeb
Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/hr-HR>

GC NORDIC AB - Finská pobočka
Lemminkäisenkatu 46, FIN-20520 Turku
tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/fi-FI>

GC NORDIC AB - GC SEVERSKÁ DÁNSKÁ
POBOČKA C/O Andersen Partners -
Advokatpartnerselskab Buen 11 6, DK-6000
Kolding
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.zubní <https://www.gc.dental/europe/da-DK>

GC NORDIC AB
c/o Lundin Auditing Firm
Erik Dahlbergsgatan 11B, SE-411 26 Göteborg
tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental, <https://www.gc.dental/europe/sv-SE>

GC AUSTRIA GmbH - švýcarská kancelář
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.zubní, <https://www.gc.dental/europe/de-CH>

GC Europe N.V. - Zastupitelství v Polsku,
W.Tetmajera 65D/2, 31-352 Krakov
Tel: +48 12 425 14 74
info.poland@gc.dental

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Austrálie
Tel: +61-2-9301 8200, Fax: +61-2-9316 4196

GC JIŽNÍ AMERIKA
Rua Heliadora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRAZÍLIE
PŠČ: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965 - CNPJ: 081ni-
tial.279.999/0001-61
RESP. TEC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. S. r. o.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapur 529541
Tel: +65 6546 7588



UK
0086

RxOnly

ZL MA LISI EN/DE & FR/IT & ES/PT 34 7 65 01/2025
NW7911 - 890371 - 10003249

CE 2797